



מדריך למשתמש
מברשת שיניים Mi Electric

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

יש לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.

1 אמצעי זהירות

הערה

במהלך השימוש הראשוני, יתכנו תופעות של גירוד או דימום קל. הדבר נובע מהתרגלות החניכיים לניקוי יסודי. במקרה זה, יש להשתמש במצב ♥ (Favorite) של מברשת השיניים. תופעה זו נעלמת לרוב לאחר שבוע-שבועיים של שימוש. אם התופעה נמשכת מעבר לשבועיים, יש להפסיק את השימוש במברשת ולפנות לרופא שיניים.

*אזהרה

1. משתמשים העוברים טיפולי שיניים, תיקוני שיניים או הוספת שתלים צריכים להיוועץ ברופא שיניים לפני השימוש.
2. מברשת השיניים Mi Electric תואמת לתקני הבטיחות של מכשירים אלקטרומגנטיים. לבעלי קוצבי לב או שתלים רפואיים אחרים, יש להיוועץ ברופא או יצרן השתלים לפני השימוש.
3. מוצר זה נועד לניקוי שיניים, חניכיים ולשון בלבד. אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת. במקרה של אי נוחות או כאב, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולהיוועץ ברופא.

*איסורים

1. אין להכניס את תחנת הטעינה למים או לכל נוזל אחר.
2. לאחר הניקוי, יש לבדוק כי תקע החשמל של תחנת העגינה יבש לחלוטין ורק אחר כך לחברו לחשמל.
3. מוצר זה מכיל סוללות נטענות. אין להשליך את המוצר לאש, או לטעון אותו, להשתמש בו או להניח אותו במקום שיש בו טמפ' גבוהה.
4. אין לנסות לשנות, לפרק או לתקן את המוצר.

*חשוב

1. יש לבדוק את המוצר בטרם השימוש הראשוני לזיהוי פגמים. במקרה של שבר או פגם, אין להשתמש במוצר.
2. לפני החיבור לחשמל, יש לבדוק כי מתח החשמל בבית תואם לסימון המתח שעל-גבי המוצר.
3. אין להשתמש במוצר אם נגרם נזק לתחנת הטעינה.
4. יש להפסיק את המוצר אם נמצא סימן לשבר במוצר (כולל הידית והראש).
5. אין להשתמש בתחנת העגינה בטמפ' גבוהה (כגון חשיפה לשמש).

*עצות

1. אין לחלוק את מברשת השיניים עם אחרים.
2. אין ללפף את כבל החשמל מסביב לתחנת העגינה כל עוד הכבל מחובר לחשמל.
3. אין להניח חפצי מתכת על תחנת העגינה כל עוד היא מחוברת לחשמל.

2 סקירת המוצר


טבעת צבעונית
(כדי להבדיל בין
מברשות)



מכסה מגן
לציר





תחנת
טעינה

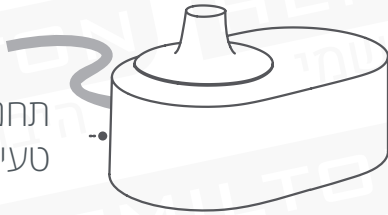

ידית
המברשת

לחצן הפעלה
/כיבוי/מצבים

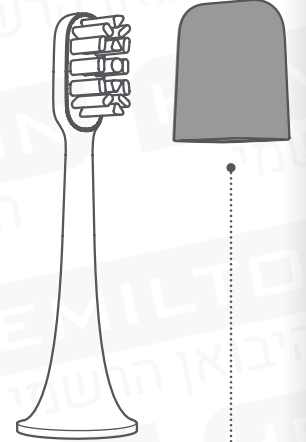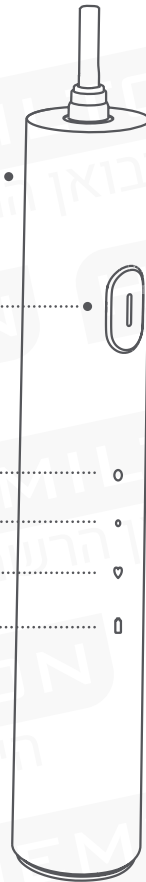

ראש
המברשת

מכסה
מגן לראש
המברשת



מדריך למשתמש

מצבים

רגיל

עדי

מועדף


מחוון הפעלה/Bluetooth

3 שימוש

עצה:

השיניים. תופעה זו נעלמת לרוב לאחר שבוע-שבועיים של שימוש. אם התופעה נמשכת מעבר לשבועיים, יש להפסיק את השימוש במברשת ולפנות לרופא שיניים.

במהלך השימוש הראשוני, יתכנו תופעות של גירוד או דימום קל. הדבר נובע מהתרגלות החניכיים לניקוי יסודי. במקרה זה, יש להשתמש במצב **Favorite** של מברשת

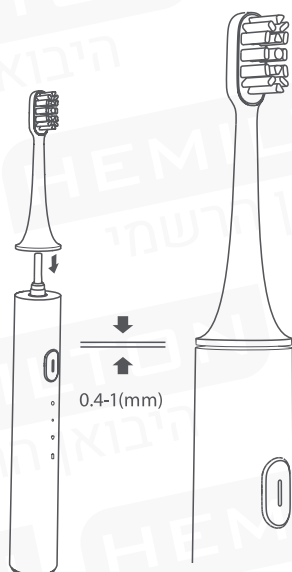

א. התקנת ראש המברשת


יש לקבוע את ראש המברשת על ידית המברשת ולוודא שישנו רווח מסוים בין שני החלקים (הרווח נועד לוודא שלא יהיה חיכוך במהלך רטט במהירות גבוהה, לשמירה על המנוע).



■ כדי להתקין את הטבעת הצבעונית: יש לוודא שהתפסים של הטבעת פונים מטה ולהתאים בין התפסים לבין נקודות האחיזה שבידית. יש ללחוץ על הטבעת הצבעונית כלי מטה תוך הפעלת כוח ולקבע אותה במקומה.


ב. התקנה והחלפה של טבעת צבעונית

■ ניתן לבחור טבעות צבעוניות לפי העדפתכם.
 ■ כדי להסיר את הטבעת הצבעונית: יש להחזיק את המברשת ביד שמאל, ללחוץ כנגד גב המברשת (מחוספס) עם אגודל יד שמאל, ללחוץ כנגד חור האוויר שבתחתית באמצעות האצבע המורה של יד ימין, להכניס את ציפורן האגודל לרווח שבין הטבעת הצבעונית והידית ולדחוף את הטבעת הצבעונית כלפי מעלה תוך הפעלת כוח מתון כדי להסירה.

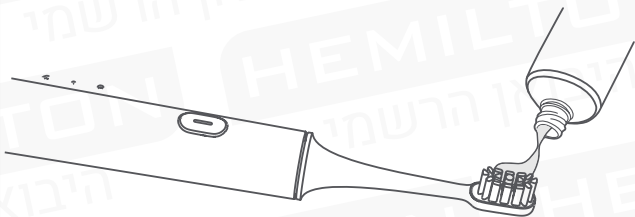

ג. מריחה של משחת שיניים

יש להרטיב את ראש המברשת ולמרוח כמות מתאימה של משחת שיניים על ראש המברשת.

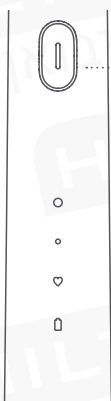

ד. בחירת מצב

לחצן פעיל/כבוי/מצבים

■ הפעלה: יש ללחוץ לחיצה קצרה להפעלת המברשת.

■ מצבי החלפה: כאשר המכשיר פועל, יש ללחוץ כדי להחליף בין מצבים.

■ השווה: יש ללחוץ למשך שניה אחת כדי להשהות את הפעולה. המברשת תיכבה אוטומטית לאחר 30 שניות של חוסר פעולה.

■ כיבוי: כאשר המברשת פועלת, יש לעבור למצב favorite (♡) ולהחליף שוב מצב כדי לכבות את המברשת.

■ במקרה הצורך, ניתן ללחוץ ולהחזיק את הלחצן 12 שניות לשחזור להגדרות היצרן (למניעת אבדן נתונים, יש לסנכרן נתונים בסמארטפון דרך Bluetooth).


ה. צחצוח נכון

■ יש להניע את המברשת באיטיות תוך שמירה על זווית של 45 מעלות בין שערות המברשת לקו החניכיים.


■ ניתן להשתמש בלחצן ההפעלה/כיבוי/מצבים כדי להחליף בין מצבי צחצוח.

■ במהלך הצחצוח, המברשת מפסיקה את הרטט לזמן קצר כל 30 שניות כדי לעודד שינוי של אזור הצחצוח.

■ המברשת תיכבה אוטומטית לאחר סיום מצב הצחצוח (ניתן להגדיר מצב צחצוח באפליקציה).

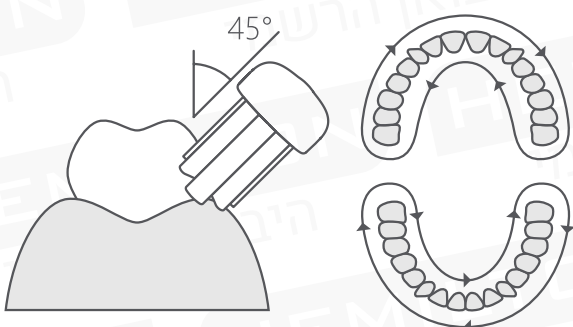


1. ניקוי ראש המברשת

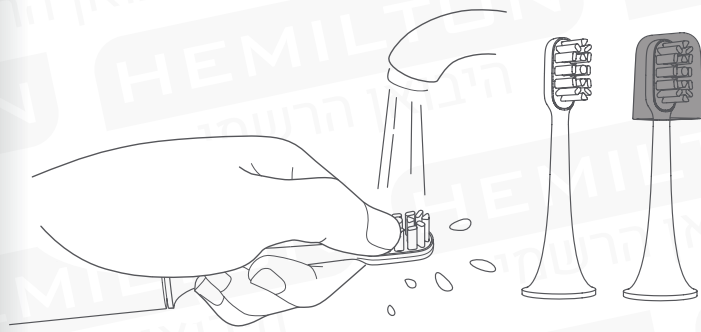

- לאחר הצחצוח, יש לשטוף את ראש המברשת מתחת למים זורמים.
- לאחר הניקוי, יש לכסות את ראש המברשת במכסה המגן כדי לשמור על הנקיין וההיגיינה של ראש המברשת.
- * חופאי שיניים ממליצים על החלפת ראש מברשת השיניים כל שלושה חודשים.

2. מעת לעת יש לטעון את המכשיר

- לאחר חיבור תחנת הטעינה, מחוון ההפעלה של מברשת השיניים יציג את מצבי הטעינה הבאים:
- **טעינה מלאה (100%):** נורה קבועה בכחול-ירוק
- **טעינה של 60%-100%:** נורה מהבהבת בכחול-ירוק
- **טעינה של 20%-60%:** נורה מהבהבת בכתום
- **טעינה של פחות מ-20%:** נורה מהבהבת באדום
- טעינה מלאה של הסוללה נמשכת כ-12 שעות כאשר הסוללה חלשה (מחוון הסוללה מהבהב באדום).
- אם ישנו חיבור Bluetooth במהלך הטעינה, מחוון ההפעלה/Bluetooth מהבהב שלוש פעמים וחיבור ה-Bluetooth נשמר. לאחר ניתוק Bluetooth, המחון מציג שוב את הטעינה.

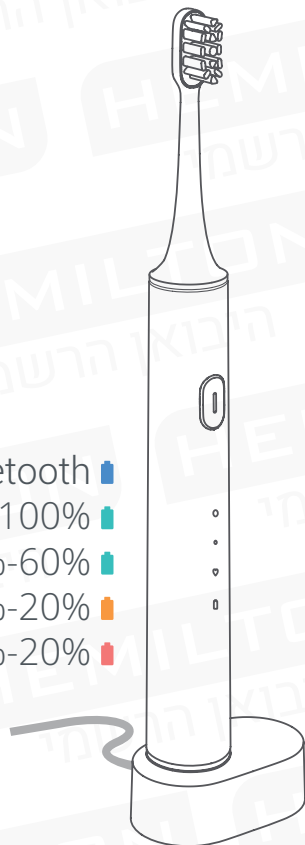

- Bluetooth מחובר: כחול
- 100%: כחול ירוק-קבוע
- 100%-60%: כחול-ירוק מהבהב
- 60%-20%: כתום מהבהב
- 0%-20%: אדום מהבהב

3 הורדת יישומון Mi Home

א. הגדרה מהירה

- ניתן לשלוט במברשת לבצע פעולות דרך מכשיר סמארטפון ביישומון Mi Home.
1. יש להוריד ולהתקין את יישומון Mi Home. יש לסרוק את קוד ה-QR או לעבור לחנות היישומונים במכשיר כדי להוריד ולהתקין את יישומון Mi Home.
 2. הוספת התקן יש לפתוח את My Devices (ההתקנים שלי) ביישומון Mi Home, לבחור + בפינה הימנית העליונה ולבצע את ההנחיות להוספת ההתקן.



יישומון Mi Home


ב. קישור המברשת ל-Bluetooth

- יש לבצע את הפעולות הנדרשות וללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי במברשת למשך 3 שניות לאישור הקישור.
- *לא ניתן להפעיל את המברשת אם היא מחוברת לסמארטפון דרך Bluetooth. לא ניתן לקשר כאשר המברשת במצב רטט.

- יש להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בסמארטפון ולקרוב אותו למברשת.
- יש לבצע את הפעולות הנדרשות ביישומון Mi Home כדי לבצע קישור. יש להוסיף את המברשת אל My Devices (ההתקנים שלי).
- יש לבחור מכשיר, להקיש על Scan Device (סרוק לגילוי התקנים) ולבחור ב-Mi Electric Toothbrush.



ג. סינכרון נתונים
יש להוריד את היישומון Mi Home, להירשם לקבלת חשבון Mi ולהתחבר באמצעות חשבון זה. לאחר מכן ניתן לגשת אל My Devices (ההתקנים שלי) ולהקיש על ההתקן ברשימת ההתקנים.

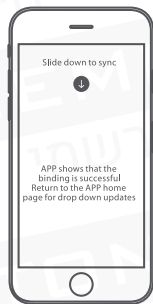

סינכרון הנתונים הושלם



יש להחליק מטה לסינכרון נתונים



יש לקרוב את המברשת לסמארטפון

■ ניתן להציג את אורך החיים (בימים) שנותר עד להחלפת ראש המברשת.

ד. תצוגת נתונים והגדרת פונקציות

- יש להפעיל מצב Favorite.
- יש להמתין להצגת דוחות הנתונים והדיווח.

4 הגנה על הסביבה

הסוללות למרכז שירות לקוחות של היבואן. צוות מרכז השירות יסיר את הסוללות וישליך את המוצר באופן ידידותי לסביבה.

סוללות הליתיום הנטענות שבמכשיר מכילות חומרים מזהמים. לפני השלכת המוצר, זכור להוציא את הסוללות ולשלוח למרכז מחזור הסוללות המתאים. ניתן גם לשלוח את

5 מפרט טכני

תחנת טעינה		ידיית מברשת	
טעינה השראתית	מצב טעינה	Mi Electric Toothbrush	שם
תחנת טעינה מאובטחת	סוג	DDYS01SKS	דגם
IPX7	דירוג IP	3.7 וולט	דירוג מתח
5v - 0.5A	קלט	0.2 ואט	עוצמה
		למעלה מ-12 שעות	משך טעינה
		IPX7	דירוג IP
			מיוצר בסין

6 פתרון בעיות

סיבה אפשרית	תקלה
המכשיר בטעינה; המכשיר מחובר ל-Bluetooth; רמת הסוללה חלשה.	לא ניתן להדליק את המכשיר
חפצים זרים חוסמים את החור של המברשת; נדבקה משחת שיניים או חומר אחר לציר המברשת; אינכם משתמשים בראש מקורי של מברשת Mi	לא ניתן לחבר את הראש למברשת
המכשיר היה מחובר ל-Bluetooth למשך זמן רב; המכשיר נמצא בשימוש תדיר.	צריכת החשמל גבוהה וצריך לטעון את המברשת לעתים קרובות.
ראש המברשת לא הותקן במקומו; נכנסו חלקיקים בין ראש המברשת לידית המברשת.	הרטט חלש
יתכן ש-Bluetooth לא הופעל; יתכן כי המברשת אינה קרובה לסמארטפון; יתכן שהמברשת במצב רטט.	לא ניתן לחבר את היישומן

רשימת תקלות ביצועים של המוצר

תקלות הפעלה	
1. לא ניתן להפעיל או לכבות את המברשת כרגיל.	Mi Electric Toothbrush
2. קצב הרטט של המברשת אינו תקין.	
3. לא ניתן לחבר את המברשת ל-Bluetooth.	
4. הטעינה אינה תקינה.	
5. המחונן אינו נדלק.	

7 אחריות

הוראות בטיחות למטען השראתי

- זדא שלמות ותקינות כבל החשמל והמטען ההשראתי.
- אין להכניס או להוציא את המטען ההשראתי ממקור החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, יש לנתקו מיידית ממקור החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ואינו מיועד לשימוש חיצוני.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל או את המטען ההשראתי.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה:

- אין להחליף את כבל החשמל או המטען ההשראתי בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, קילוף מדבקות, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בחלקי פלסטיק או גומי של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למקור טעינה חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co.,Ltd , Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, China

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114